

MANUALE D'USO

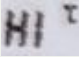
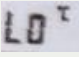
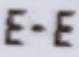
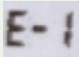
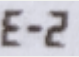
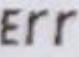

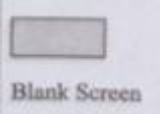
Termometro ad infrarossi – AET R1B1

Dati Tecnici

TERMOMETRO A INFRAROSSI NON-CONTACT A PISTOLA	
MODELLO	AET-R1B1
TENSIONE DI FUNZIONAMENTO	DC 3V
BATTERIE RICHIESTE	AAA x2 (NON INCLUSE)
TEMPO DI MISURAZIONE	< 1,5 SECONDI
DISTANZA DI MISURAZIONE	1 - 5 CM
MODALITA' DI MISURAZIONE	MODALITA' 1: TEMPERATURA CORPOREA MODALITA' 2: TEMPERATURA SUPERFICI
PRECISIONE RILEVAMENTO TEMPERATURA CORPOREA	35°C -42°C +/- 0.2°C 32°C - 39°C +/- 0.3°C 42.1°C - 42.9°C +/- 0.3°C
SENSIBILITA'	0.1°C
CAPACITA' DI MEMORIA	32sets DI MISURAZIONI
BATTERIA SCARICA	SE INFERIORE A 2.6V (+/- 0.15V)
SPEGNIMENTO AUTOMATICO	DOPO 60 SECONDI DI INUTILIZZO
AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO	10°C - 40°C 70kPa - 106kPa PRESSIONE ATMOSFERICA UMIDITA': Rh<85% non-condensata
DIMENSIONI	136mm x 38mm x 33mm
PESO	108g
RANGE TEMPERATURA	Più bassa di 32°C: lo schermo mostra LO°C Più alta di 42.9°C: lo schermo mostra HI°C (colore rosso)
RETROILLUMINAZIONE DISPLAY	SI

Avvertenze per un corretto utilizzo:

- Tenere pulito il sensore frontale del termometro
- Usare il termometro in un ambiente con temperature stabili. Quando la temperatura ambientale cambia notevolmente (es. passaggio da un ambiente chiuso ad uno aperto) aspettare mezz'ora prima di procedere con la misurazione
- Non misurare la temperatura corporea subito dopo aver misurato superfici con un'alta temperatura

SCHERMATA PRINCIPALE – informazioni errori	
	La temperatura rilevata è sopra i 42.9°C
	La temperatura rilevata è inferiore a 32°C
	Non riesce a rilevare la temperatura. Accendere e spegnere il termometro.
	La temperatura testata è anormale. Accendere e spegnere il termometro.
	La temperatura dell'ambiente è anormale. Accendere e spegnere il termometro.
	La temperatura dell'ambiente è sotto i 10°C o superiore a 40°C
	Batteria scarica
	Schermata bianca: 1) Il termometro si è spento automaticamente 2) La batteria non è correttamente installata 3) La batteria è scarica